




**SERAG
WIESSNER**

Décadas de experiencia
Alta tecnología
Alta calidad de acero
Hecho a mano



Agujas

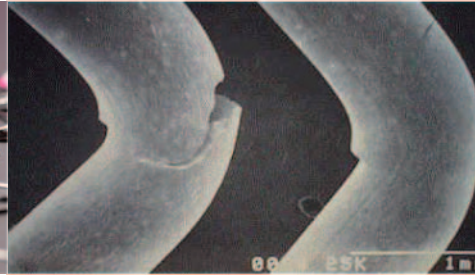

Forma de la aguja

D = $\frac{3}{8}$ círculo

H = $\frac{1}{2}$ círculo

Tipo de aguja

S = aguja triangular

Características especiales


S = punta premium extrafina
(menor fuerza de penetración)
(menor trauma de tejido)

Ejemplo:


DS18 D $\frac{3}{8}$ círculo

S aguja triangular

18 18mm de longitud

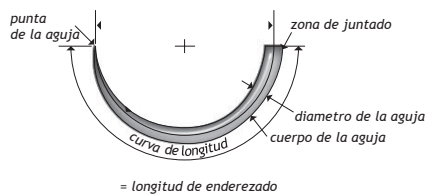

- Referencia producto 1
- Referencia producto 2
- SERAG-WIESSNER agujas hechas de acero de 300

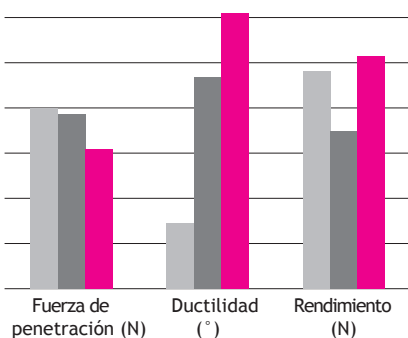

Durante casi 150 años, Serag-Wiessner ha sido sinónimo de suturas quirúrgicas de la más alta calidad. Como el mayor fabricante alemán establecido, la compañía combina décadas de tradición con tecnología de última generación. La tecnología de producción automatizada de gran precisión se combina con el trabajo confiable y diligente de nuestros empleados con experiencia. Además, trabajamos en estrecha colaboración con los profesionales médicos en la práctica clínica y la investigación.

Esto se traduce en una amplia gama de materiales de sutura de alta calidad para la cirugía dental y maxilofacial.

Agujas

Ofrecemos una amplia gama de agujas atraumáticas para cirugía dental y maxilofacial.


Son agujas de acero inoxidable de alta resistencia a la flexión y penetración, cualidades excepcionales que permiten que el cirujano pueda trabajar con facilidad y seguridad.

La designación de las agujas atraumáticas utiliza una combinación de letras y números tal como recomendó el Comité Técnico de la Asociación de Fabricantes de sutura quirúrgica.


Las dos primeras letras indican la forma de aguja y la sección transversal.

Una tercera letra indica las características especiales de la aguja.

El número después de las letras da la longitud de la aguja (longitud real cuando se alarga hacia fuera).

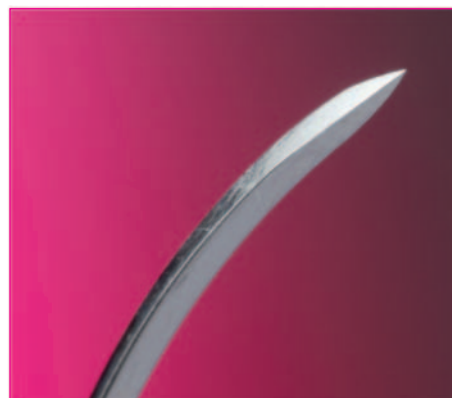

▼ Aguja cortante invertida

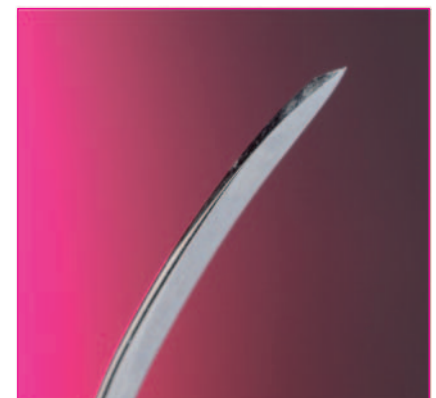

▼ Aguja cortante invertida con punta especial

Material de sutura



NO ABSORBIBLES

SERALON®

Este hilo de poliamida no absorbible es extremadamente suave y flexible en comparación con las otras suturas de monofilamento. Además, tiene el necesario amarre de rendimiento de seguridad del nudo.

MATERIAL  Poliamida / Nylon

SIMBOLO  Azul, monofilamento

TAMAÑO USP 6/0 a 3/0

ABSORCIÓN No absorbible

COMBINACIONES DISPONIBLES

Multipacks
DS

VENTAJAS

Extraordinaria capacidad de deslizamiento
Nudo de alta resistencia
Manejo muy agradable

SERALENE®

Gracias a su suave superficie libre de poros, este hilo no absorbible pasa de manera óptima a través de los tejidos. PVDF está relacionado con PTFE.

MATERIAL  Fluoruro de polivinilideno

SIMBOLO  Azul, monofilamento

TAMAÑO USP 8/0 a 3/0

ABSORCIÓN No absorbible

COMBINACIONES DISPONIBLES

Multipacks
DS / DSS


VENTAJAS

Fuerza tensil sostenida
Alta estabilidad del nudo
Sin efecto de memoria después de estirarla una sola vez
Mayor suavidad que un prolipropileno

SERAFLEX®

Los hilos de seda cruda son especialmente trenzados y recubiertos para que sean impermeables y resistentes a las secreciones serosas.

MATERIAL  Seda

SIMBOLO  negro, multifilamento recubierto

TAMAÑO USP 6/0 a 3/0

ABSORCIÓN No absorbible

COMBINACIONES DISPONIBLES

Multipacks
DS / HS


VENTAJAS


Alta estabilidad del nudo
Extraordinaria capacidad de deslizamiento
Manejo muy agradable

ABSORBIBLES

SERAPID®

Esta sutura tiene una estructura flexible, óptima y trenzado de alta resistencia a la tracción del nudo. Se absorbe en un tiempo particularmente breve.

MATERIAL  ácido poliglicólico

SIMBOLO  Incolora, multifilamento (trenzado), recubierto

TAMAÑO USP 5/0 a 3/0

ABSORCIÓN 50% resistencia a la tensión después de 5-7 días.
0% después de 42 días.

COMBINACIONES DISPONIBLES

Multipacks
DS/DSS/HS

VENTAJAS

Nudo de alta resistencia a la tensión
Fácil deslizamiento del nudo
Paso tisular óptimo

SERAFAST®

El uso de Serafast® está previsto para la sutura de tejidos blandos o para ligaduras en las que esté indicado un hilo de sutura reabsorbible durante un período corto (hasta 2 semanas).

MATERIAL  ácido poliglicólico caprolactona

SIMBOLO  Incolora, monofilamento

TAMAÑO USP 5/0 a 3/0












ABSORCIÓN 50% resistencia a la tensión después de 8-13 días
0% después de 90-120 días

COMBINACIONES DISPONIBLES



Multipacks
DS / DSS



VENTAJAS

Alta estabilidad y seguridad del nudo
Manejo excelente
Excepcional capacidad de deslizamiento en el tejido
Perfil de absorción óptimo
Escaso efecto memoria después de estirarla una sola vez

			Sutura	Material	USP	Longitud sutura	Unid.	Referencia	Precio
NO ABSORBIBLES	DS 10 	SERAFLEX	Seda SILK	6/0	1 x 0,50	24	IO071711	71,00 €	
		SERALON	Poliamida PA / Nylon	5/0	1 x 0,75	24	VO103411	63,33 €	
	DS 12 	SERAFLEX	Seda SILK	4/0	1 x 0,50	24	IO151712	61,67 €	
				5/0	1 x 0,50	24	IO101712	61,67 €	
				6/0	1 x 0,50	24	IO071712	61,67 €	
		SERALENE	Fluoruro de polivinilideno PVDF	4/0	1 x 0,50	24	LO151712	60,33 €	
				5/0	1 x 0,50	24	LO101712	60,33 €	
		SERALON	Poliamida PA / Nylon	4/0	1 x 0,75	24	VO153412	56,33 €	
	5/0			1 x 0,75	24	VO103412	56,33 €		
	6/0			1 x 0,75	24	VO073412	56,33 €		
	DS 15 	SERAFLEX	Seda SILK	3/0	1 x 0,75	24	IO203413	55,33 €	
				4/0	1 x 0,50	24	IO151713	55,33 €	
				5/0	1 x 0,50	24	IO101713	55,33 €	
		SERALENE	Fluoruro de polivinilideno PVDF	3/0	1 x 0,75	24	LO203413	51,67 €	
				4/0	1 x 0,50	24	LO151713	51,67 €	
				5/0	1 x 0,75	24	LO103413	51,67 €	
		SERALON	Poliamida PA / Nylon	3/0	1 x 0,75	24	VO203413	45,67 €	
				4/0	1 x 0,75	24	VO153413	45,67 €	
				5/0	1 x 0,75	24	VO103413	45,67 €	
	6/0			1 x 0,75	24	VO073413	45,67 €		
DS 18 	SERAFLEX	Seda SILK	3/0	1 x 0,75	24	IO203414	49,33 €		
			4/0	1 x 0,75	24	IO153414	49,33 €		
	SERALENE	Fluoruro de polivinilideno PVDF	3/0	1 x 0,75	24	LO203414	50,00 €		
			4/0	1 x 0,75	24	LO153414	50,00 €		
SERALON	Poliamida PA / Nylon	3/0	1 x 0,75	24	VO203414	45,33 €			
		4/0	1 x 0,75	24	VO153414	45,33 €			
DS 21 	SERALENE	Fluoruro de polivinilideno PVDF	3/0	1 x 0,75	24	LO203497	50,00 €		
HS 18 	SERAFLEX	Seda SILK	3/0	1 x 0,50	24	IO20171K	49,67 €		
HS 20 	SERAFLEX	Seda SILK	3/0	1 x 0,75	24	IO203462	49,67 €		
			4/0	1 x 0,75	24	IO153462	49,67 €		
NO ABSORBIBLES PREMIUM	DSS 10 	SERALENE	Fluoruro de polivinilideno PVDF	6/0	1 x 0,50	24	LO07171S	93,67 €	
	DSS 13 	SERALENE	Fluoruro de polivinilideno PVDF	4/0	1 x 0,50	24	LO15171L	93,67 €	
				5/0	1 x 0,75	24	LO10341L	93,67 €	
				6/0	1 x 0,50	24	LO07171L	93,67 €	
	DSS 15 	SERALENE	Fluoruro de polivinilideno PVDF	3/0	1 x 0,50	24	LO20171T	93,67 €	
				4/0	1 x 0,50	24	LO15341T	93,67 €	
				5/0	1 x 0,50	24	LO10171T	93,67 €	
				6/0	1 x 0,50	24	LO07171T	93,67 €	
DSS 18 	SERALENE	Fluoruro de polivinilideno PVDF	3/0	1 x 0,75	24	LO20341M	93,67 €		
			4/0	1 x 0,75	24	LO15341M	93,67 €		

* Existen más formatos y montajes fuera de este catálogo. Si no encuentra lo que desea, póngase en contacto con nosotros.

		Sutura	Material	USP	Longitud sutura	Unid.	Referencia	Precio
ABSORBIBLES	DS 15 	SERAPID	ácido poliglicólico PGAr	4/0	1 x 0,45	36	3O151313	150,50 €
		SERAPID	ácido poliglicólico PGAr	3/0 4/0 5/0	1 x 0,70 1 x 0,70 1 x 0,45	36 36 36	3O203214 3O153214 3O101314	149,00 € 149,00 € 149,00 €
	DS 18 	SERAPID	ácido poliglicólico PGAr	3/0 4/0 5/0	1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24	4O201314 4O153214 4O103214	87,67 € 87,67 € 87,67 €
		SERAFAST	ácido poliglicólico caprolactona PGACL	3/0 4/0 5/0	1 x 0,45 1 x 0,70 1 x 0,70	24 24 24	4O201314 4O153214 4O103214	87,67 € 87,67 € 87,67 €
		SERAPID	ácido poliglicólico PGAr	4/0	1 x 0,45	36	3O151361	149,00 €

ABSORBIBLES PREMIUM	DSS 13 	SERAPID	ácido poliglicólico PGAr	3/0 4/0 5/0	1 x 0,45 1 x 0,45 1 x 0,45	36 36 36	3O20131L 3O15131L 3O10131L	272,50 € 272,50 € 272,50 €
		SERAFAST	ácido poliglicólico caprolactona PGACL	4/0 5/0	1 x 0,45 1 x 0,45	24 24	4O15131L 4O10131L	159,33 € 159,33 €
		SERAPID	ácido poliglicólico PGAr	4/0	1 x 0,45	36	3O15131T	272,50 €
		SERAPID	ácido poliglicólico PGAr	3/0 4/0	1 x 0,70 1 x 0,70	36 36	3O20321M 3O15321M	272,50 € 272,50 €
	DSS 15 	SERAFAST	ácido poliglicólico caprolactona PGACL	3/0 4/0	1 x 0,45 1 x 0,70	24 24	4O20131M 4O15321M	159,33 € 159,33 €
		SERAPID	ácido poliglicólico PGAr	4/0	1 x 0,45	36	3O15131T	272,50 €
		SERAPID	ácido poliglicólico PGAr	3/0 4/0	1 x 0,70 1 x 0,70	36 36	3O20321M 3O15321M	272,50 € 272,50 €
		SERAFAST	ácido poliglicólico caprolactona PGACL	3/0 4/0	1 x 0,45 1 x 0,70	24 24	4O20131M 4O15321M	159,33 € 159,33 €

